



CRYO XC™

CRYO XC™ PLUS
CRYO XC™



CRYO XC™ PLUS | CRYO XC™

PREDSTAVENIE

CRYO XC™ je technologicky vyspelá kryosauna navrhnutá pre **efektívnu, bezpečnú a pohodlnú aplikáciu celotelovej kryoterapie.**

CRYO XC™ je vybavený najnovšími funkciami pre bezpečné a ergonomické každodenné používanie, ako sú **dvojité dvere, výťah, obrazovka s informáciami o procedúre, dotykový ovládací panel a najnovšia bezpečnostná súprava.**

Jej kompaktné rozmery, moderný dizajn, účinnosť a vynikajúci zážitok z kryoterapie z nej robia ideálnu voľbu pre firmy, kluby aj jednotlivcov.

CRYO XC™ je dokonalým doplnkom **fyzioterapeutických kliník, fitness centier, športových klubov, kúpeľov, kozmetických kliník, ako aj súkromných rezidencií.**



PREDSTAVENIE

CELOTELOVÁ KRYOTERAPIA

Celotelová kryoterapia je trojminútová procedúra ktorá vystavuje telo extrémnym teplotám **až do -140 °C**, na podporenie rýchlej regenerácie, zvýšenie výkonnosti, znížie únavy, podporu prirodzenej krásy a zlepšenie celkovej pohody.

Každá procedúra zvyčajne **trvá 2 až 3 minúty** a poskytuje používateľom **osviežujúci a revitalizujúci zážitok, ktorý prináša výhody presahujúce tie, ktoré ponúkajú tradičné metódy** založené na chlade, ako je ponor do vody alebo terapia ľadom.



FYZIOTERAPIA

- Manažment bolesti
- Redukcia opuchu
- Manažment zápalu
- Zlepšenie cirkulácie
- Rýchlejšie zotavenie



ŠPORT

- Zvýšenie výkonu
- Skrátene času zotavenia
- Manažment bolesti
- Manažment zápalu



ESTETIKA

- Redukcia celulitídy
- Zvýšenie produkcie kolagénu
- Zlepšenie textúry pokožky
- Rýchlejšie zotavenie po kozmetických procedúrach



WELLBEING

- Zlepšená kvalita spánku
- Zvýšená hladina energie
- Posilnenie mladistvého vzhľadu

CRYO XC™ PLUS | CRYO XC™

HLAVNÉ PREDNOSTI

Individualizácia

Dostupnosť v 25 rôznych farebných kombináciách

Dotykový displej operátora

Dotyková obrazovka orientovaná na operátora umožňuje jednoduchú správu procedúry

Špičkové bezpečnostné prvky

Až 10 pokročilých bezpečnostných funkcií pre bezpečnú prevádzku za každých okolností



Obrazovka s informáciami o procedúre

Informačná obrazovka na strane používateľa zobrazujúca zostávajúci čas procedúry a aktuálnu teplotu

Režim tepelného kontrastu

Jedinečná možnosť Teplej/Kryo kombinovanej procedúry na vylepšenie kryto efektov

Špičková kvalita

Komponenty najvyššej kvality v kombinácii so spoľahlivou prevádzkou a vyváženým zážitkom z kryoterapie.

CRYO XC™ PLUS | CRYO XC™

VLASTNOSTI



VLASTNOSTI

CRYO XC™

CRYO XC™ PLUS

21,5" DOTYKOVÁ OBRAZOVKA - OVLÁDACÍ PANEL	✓	✓
15" MULTIMEDIÁLNA/INFO OBRAZOVKA	✓	✓
TERMOKONTRASTNÁ KRYOTERAPIA	✓	✓
PRISPŮSOBITELNÁ ORIENTÁCIA	✓	✓
VÝŤAH	✓	✓
DIFÚZORY	✓	✓
AKTÍVNY SYSTÉM SUŠENIA	✓	✓
ZÁZNAMNÍK PROCEDÚR	✓	✓
DIALKOVÁ DIAGNOSTIKA	✓	✓
BEZPEČNOSTNÝ VENTIL	✓	✓
VÝFUKOVÝ VENTILÁTOR	✓	✓
MONITOROVANIE HLADINY KYSLÍKA	x	✓
DVEROVÝ SENZOR	x	✓
SLEDOVANIE VLHKOSTI	x	✓
SLEDOVANIE TLAKU	x	✓
TLAČIDLO NÚDZOVÉHO ZASTAVENIA PROCEDÚRY	x	✓

CRYO XC™ PLUS | CRYO XC™ SYSTÉMY



TLAKOVÝ SYSTÉM



BEZTLAKOVÝ SYSTÉM

POPIS	Tlakový systém CRYO XC™ využíva tlakové nádoby na skladovanie a zásobovanie tekutým dusíkom.	Beztlakový systém CRYO XC™ využíva na skladovanie a zásobovanie tekutým dusíkom beztlakové nádoby alebo Dewarove nádoby.
DOSTUPNOSŤ	CRYO XC™ PLUS CRYO XC™	CRYO XC™ PLUS CRYO XC™
CHLADIACE MÉDIUM	Tlakový systém je chladený kvapalným dusíkom	Beztlakový systém je chladený kvapalným dusíkom
SKLADOVANIE DUSÍKA	Objem: 70 L až 1 000 L Optimálny tlak 1,5 -2,5 Bar 22-37 PSI *Tlakové nádoby a prípojky nie sú súčasťou dodávky	Kapacita: 50L *Dve Dewarove nádoby sú súčasťou beztlakového systému.
SPOTREBA DUSÍKA	Kvapalný dusík: 5 l až 8 l	Kvapalný dusík: 4 l až 7 l
VHODNÉ PRE	Vysoká kapacita a návštevnosť. Wellness/Recovery centrá, športové organizácie, fitness centrá, tréningové zariadenia, rehabilitačné zariadenia, zdravotnícke zariadenia/kliniky	Cryo Startupy, wellness/regeneračné centrá, kúpele, športové organizácie, fitness centrá, tréningové zariadenia, kozmetické centrá, domáce a súkromné použitie, exkluzívne spoločenské kluby

CRYO XC™ PLUS | CRYO XC™

INŠTALÁCIA

TLAKOVÝ SYSTÉM



Požiadavky na inštaláciu pre oba systémy

Priestor

Minimum:	Odporúčané:	Výška stropu:
20m ²	25m ²	230 cm

Orientácia jednotky

To môže byť dôležitý faktor pre miestnosti s obmedzeným priestorom. CRYO XC™ ponúka flexibilnú ľavú/pravú orientáciu jednotky.

BEZTLAKOVÝ SYSTÉM



Elektrické špecifikácie

Max: 4000W • Pri nečinnosti: 140W • Relácia: 1000W • Sušenie: 3400W
208 až 240V | 50 Hz - 60 Hz | Odporúča sa 24A istič.

Vybavené európskou kontinentálnou zástrčkou - Môže vyžadovať zmenu vyhradeného elektrického obvodu (odporúča sa).

Ventilácia

Vyžaduje sa minimálne šesť výmen vzduchu za hodinu.

CRYO XC™ PLUS | CRYO XC™


ŠPECIFIKÁCIA

TEPLOTA PROCEDÚRY	Rozsah teplôt procedúry – odporúčané Rozsah teplôt procedúry – rozšírený	(-110 °C až -140 °C) (-110 °C až -160 °C)
SKLADOVACIE NÁDOBY	Tlakový systém Beztlakový systém	Nádoby nie sú súčasťou dodávky Vrátane 2x 50-litrovej nádoby
SPOTREBA	Tlakový systém Beztlakový systém Elektrina	5 - 8 litrov (LN2) 4 - 7 litrov (LN2) Procedúra: Až 500 W Sušenie: Až 3000 W
ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE	Výstupné napätie Frekvencia Ampéry	230V 50 Hz Min. 16 A
CERTIFIKÁCIA	Značka CE FDA 513 g Nemedicínske zariadenie (Klasifikácia)	✓ ✓
POŽIADAVKY NA INŠTALÁCIU	Plocha Vetranie Tekutý dusík	Min. 9 m2 / 97 stôp2 Optimálne 15 m2 / 160 ft2 Aktívna ventilácia / AC Pravidelné zásobovanie



Výška
2200 mm

Šírka
950 mm

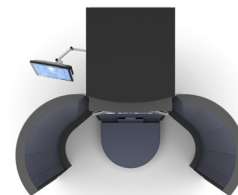

Hĺbka
1500 mm

Rozpätie
1500 mm

Hmotnosť: 340 - 360 kg



RECOVERY FOR EVERYONE

Kontaktuj nás
info@cryoniq.com

Navštívte nás
www.cryoniq.com

